


DERMAROLLER BEHANDLING

Behandlingen skal udføres blidt uden tryk. Rullen skal gøre arbejdet. Der må ikke komme blod frem og behandlingen må ikke gøre ondt.

1. Før du begynder at rulle med din dermaroller skal du rense eller vaske området du ønsker at behandle
2. Før rullen forsigtigt over det område du ønsker at behandle. 4-5 gange vandret, 4-5 gange lodret, 4-5 gange diagonalt til venstre og 4-5 gange diagonalt til højre, som vist nedenfor. En behandling af hele ansigtet tager 5 minutter.

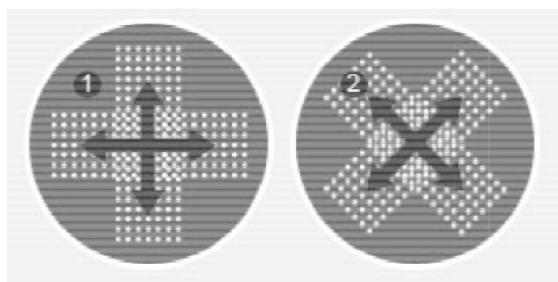

3. Huden vil blive en anelse rød efter brug og vi anbefaler at du benytter din dermaroller om aftenen. Hvis du bruger din dermaroller om dagen, skal du benytte solcreme inden du går ud.
4. Rul kun 1 gang om dagen og op til 5 gange om ugen.
5. Efter du har rullet bør du bruge en god creme. Din hud er op til 200 gange mere modtagelig for cremer når du har brugt din Dermaroller.
6. Efter du har brugt din dermaroller skal du rense den under varmt vand og med et desinficerende middel for at fjerne eventuelle bakterier. Ruller på 0,2 mm kan nøjes med at blive skyllet under varmt vand
7. Læg din dermaroller tilbage i etuiet. Etuiet skal holdes rent. Skyld det under varmt vand og lad det tørre. Brug ikke klud o.lign til at tørre det med, da det er der bakterierne er. Opbevar din dermaroller utilgængeligt for børn. En dermaroller er personlig og bør ikke deles med andre.
8. En dermaroller holder i ca. 3 måneder og når den bliver slidt bliver den sløv og må ikke længere benyttes.

En dermaroller er en hud-foryngende behandling, hvor man med en rulle med micro nåle, laver tusindvis af microhuller i hudens overflade. De mikroskopiske huller i hudens øverste hudlag gør, at huden tror den er skadet og begynder at reparere sig selv.

En dermaroller stimulerer dannelsen af collagen, som forbedrer udseendet af ar, fine linjer, rynker, acne ar, strækmærker og appelsinhud. Endvidere hjælper en

Fortsættes næste side

Har du yderlige spørgsmål kan du kontakte:
kundeservice@billigparfume.dk

BilligParfume.dk
Vi kan mere end parfume
- alle de originale og kendte mærker

dermaroller på optagelse af næring til din hud, således vil din hud optage cremer op til 200 gange bedre end før en behandling.

En behandling med dermaroller er 100 % naturlig. Huden reparerer sig selv og skaber selv det fantastiske resultatet.

En dermaroller behandling skal udføres blidt uden tryk, rullen skal gøre arbejdet. Rullens fine titanium nåle har en længde på kun 0,2 mm til øjne og 0,5 mm eller 1,0 mm til ansigt eller 1,0 mm til krop, dette giver en helt smertefri behandling uden risiko for at skade huden. Brug af længere nåle er en medicinsk behandling og skal udføres på speciel klinikker.

Allerede efter 1-3 ugers brug vil du begynde at se resultater.

FORDELE VED DERMAROLLER:

Fjerner de døde hudceller

Reducerer rynker

Lysner og reducerer ar og akne ar

Udjævner pigment pletter og forskelle i huden

Forbedrer optagelsen af næring til huden med op til 200 gange

Porer bliver mindre synlige

Huden bliver friskere og yngre at se på

Reducerer eller fjerner strækmærker markant

Reducerer eller fjerner appelsinhud markant

Har en slankende og opstrammende effekt

Forøger blodgennemstrømningen

EN DERMAROLLER MÅ IKKE BENYTTES PÅ:

Læberne og øjenlåg,

Akne eller åbne sår

Irriteret eller inficeret hud

Rosacea

Eksem og modermærker

Gravide og ammende

Er du i tvivl om du må benytte en dermaroller så spørg din læge til råds

VI ANBEFALER:

0,2 mm nåle til under øjne. Start med at rulle hver anden dag.

0,5 mm nåle til ansigt til fine linjer, rynker, ar m.v. Start med at rulle hver anden dag.

1,0 mm nåle til strækmærker, ar og appelsinhud på kroppen. Rul 5 dage om ugen.

Nåle over 1,0 mm bør ikke bruges til hjemmebrug.

FORHOLDSREGLER:

- En dermaroller er personlig og kommer i steril indpakning. Den skal renses under varmt vand og med et desinficerende middel efter brug, for at fjerne eventuelle bakterier.

- Den holder afhængig af hvor meget du bruger den ca. 3 måneder. Når den er slidt, bliver den sløv og må ikke længere benyttes.



Har du yderlige spørgsmål kan du kontakte:
kundeservice@billigparfume.dk

BilligParfume.dk
Vi kan mere end parfume
- alle de originale og kendte mærker